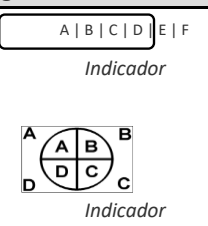


Dados Cadastrais:

O.S:01281			Data: 21/08/2024		
Cliente:	DOREMUS		Patrimônio:	003424	
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62		Local / Setor:	SALA DE PESAGEM OLEOS AROMAS	
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	RADWAG	Capac. 1:	360,000 g	d1:	0,001 g
Modelo	PS-360	Capac. 2:		e1:	g
Nº Serie	12370706	Carg. Mín. :	0,020 g	d2:	0,010 g
Identific.	PD-AP01			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	360,000 g	Classe II

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE			
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma:		100,000 g	
ANTES						
0,000 g	0,000 g	0,000 g	Leitura canto A	100,001 g		
0,020 g	0,020 g	0,000 g	Leitura canto B	100,001 g		
50,000 g	50,000 g	0,000 g	Leitura canto C	100,000 g		
180,000 g	180,000 g	0,000 g	Leitura canto D	100,000 g		
200,000 g	200,000 g	0,000 g	Leitura canto E	N/A		
360,000 g	360,000 g	0,000 g	Leitura canto F	N/A		
			TESTE DE MOBILIDADE em g			PORTARIA
200,000 g	200,000 g	0,000 g	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	157/22 X
180,000 g	180,000 g	0,000 g	180,000	0,050	180,050	63/44
50,000 g	50,000 g	0,000 g	PROVA DE FIDELIDADE			
0,020 g	0,020 g	0,000 g	1 180,000 g	2 180,000 g		
0,000 g	0,000 g	0,000 g	3 180,000 g	4 180,000 g		
---	---	---	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão			
---	---	---	Equipamento conforme: SIM			
---	---	---	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas das balanças.			
---	---	---	Incertezas expandida das leituras: ±0,006%			IT - 26 Rev. 02
---	---	---	Padrões de trabalho utilizados:			
---	---	---	jogo de peso 23			
---	---	---	Técnico:			Reg. IPEM
---	---	---	VINICIUS GOMES			10002784

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.