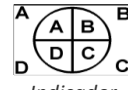


Dados Cadastrais:

O.S:01281				Data: 08/08/2024	
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	002509
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	P&D / APLICAÇÃO AROMAS
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	SHIMADZU	Capac. 1:	620,000 g	d1:	0,001 g
Modelo	UX620H	Capac. 2:		e1:	g
Nº Serie	D467610255	Carg. Mín. :	0,020 g	d2:	0,010 g
Identific.	PD-BAD06			e2:	--
Local de calibração:		<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	620,000 g
				Classe II	

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE			
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma:		200,000 g	
ANTES			Leitura canto A	200,000 g	A B C D E F	
0,000 g	0,000 g	0,000 g	Leitura canto B	200,000 g	Indicador	
0,020 g	0,020 g	0,000 g	Leitura canto C	200,001 g	 Indicador	
50,000 g	50,000 g	0,000 g	Leitura canto D	200,001 g		
300,000 g	300,000 g	0,000 g	Leitura canto E	N/A		
450,000 g	450,000 g	0,000 g	Leitura canto F	N/A		
620,000 g	620,001 g	0,001 g	TESTE DE MOBILIDADE em g			
450,000 g	450,000 g	0,000 g	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	157/22 X
300,000 g	300,000 g	0,000 g	300,000	0,020	300,020	63/44
50,000 g	50,000 g	0,000 g	PROVA DE FIDELIDADE			
0,020 g	0,020 g	0,000 g	1	300,000 g	2	300,000 g
0,000 g	0,000 g	0,000 g	3	300,000 g	4	300,000 g
---	---	---	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão			
---	---	---	Equipamento conforme: SIM			
---	---	---	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% -			
---	---	---	As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.			
---	---	---	Incertezas expandida das leituras: ±0,006%			IT - 26 Rev. 02
---	---	---	Padrões de trabalho utilizados:			
---	---	---	jogo de peso 23			
---	---	---	Técnico:		Reg. IPEM	
---	---	---	VINICIUS GOMES		10002784	

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.