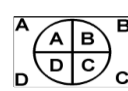


Dados Cadastrais:				O.S:01281	Data: 12/08/2024
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	000234
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	P&D / AROMAS SALGADOS
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO/OHAUS	Capac. 1:	4100,00 g	d1:	0,01 g
Modelo	ARD 110	Capac. 2:		e1:	g
Nº Serie	10581972	Carg. Mín. :	0,50 g	d2:	0,10 g
Identific.	PD-BAS03			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	4100,00 g	Classe II

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE				
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 1000,00 g				
ANTES			Leitura canto A	1000,01 g	A B C D E F		
0,00 g	0,00 g	0,00 g	Leitura canto B	1000,00 g	Indicador  Indicador		
0,50 g	0,50 g	0,00 g	Leitura canto C	1000,00 g			
500,00 g	500,00 g	0,00 g	Leitura canto D	999,99 g			
2000,00 g	1999,97 g	-0,03 g	Leitura canto E	N/A			
2050,00 g	2049,92 g	-0,08 g	Leitura canto F	N/A			
4100,00 g	4099,81 g	-0,19 g	TESTE DE MOBILIDADE em g			PORTARIA	
2050,00 g	2049,92 g	-0,08 g	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga		
2000,00 g	1999,97 g	-0,03 g	2000,00	0,50	2000,50	157/22	X
500,00 g	500,00 g	0,00 g	PROVA DE FIDELIDADE			63/44	
0,50 g	0,50 g	0,00 g	1	2000,00 g	2	2000,00 g	
0,00 g	0,00 g	0,00 g	3	2000,00 g	4	2000,00 g	
DEPOIS			Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão				
0,50 g	0,50 g	0,00 g	Equipamento conforme: SIM				
500,00 g	500,00 g	0,00 g	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%-				
2000,00 g	2000,00 g	0,00 g	As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas das balanças.				
2050,00 g	2050,00 g	0,00 g	Incertezas expandida das leituras: ±0,006%			IT - 26 Rev. 02	
4100,00 g	4100,00 g	0,00 g	Padrões de trabalho utilizados:				
2050,00 g	2050,00 g	0,00 g	jogo de peso 23				
2000,00 g	2000,00 g	0,00 g					
500,00 g	500,00 g	0,00 g					
0,50 g	0,50 g	0,00 g					
0,00 g	0,00 g	0,00 g					
			Técnico:		Reg. IPEM		
			VINICIUS GOMES		10002784		

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.