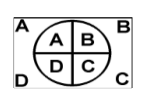


| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|---------|----|------------------|-------------------------|
| Dados Cadastrais: | | | | O.S:01281 | Data: 12/08/2024 |
| Cliente: | DOREMUS | | | Patrimônio: | 008207 |
| Endereço: | RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62 | | | Local / Setor: | P&D / AROMAS SALGADOS |
| Cidade: | GUARULHOS | Estado: | SP | CNPJ: | 54.289.830/0001-00 |

Especificações do Equipamento:

| | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Fabricante | BEL | Capac. 1: | 5200,00 g | d1: | 0,01 g |
| Modelo | M52021 | Capac. 2: | | e1: | g |
| Nº Serie | CHBR2201293 | Carg. Mín. : | 0,50 g | d2: | 0,10 g |
| Identific. | PD-BAS07 | | | e2: | -- |
| Local de calibração: | <input checked="" type="radio"/> Cliente | <input type="radio"/> Oficina interna | Ponto de trabalho: | 5200,00 g | Classe II |

| TESTE DE PESAGEM | | | EXCENTRICIDADE | | | |
|------------------|---------------|--------|---|---------------------|--|-----------------|
| CARGA | LEITURA | ERRO | Centro da plataforma: | | 2000,00 g | |
| | ANTES | | Leitura canto A | 2000,01 g | A B C D E F | |
| 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | Leitura canto B | 2000,00 g |  Indicador | |
| 0,50 g | 0,50 g | 0,00 g | Leitura canto C | 2000,02 g | | |
| 1500,00 g | 1500,00 g | 0,00 g | Leitura canto D | 2000,00 g | | |
| 2500,00 g | 2500,00 g | 0,00 g | Leitura canto E | N/A | | |
| 4000,00 g | 4000,01 g | 0,01 g | Leitura canto F | N/A | | |
| 5200,00 g | 5200,02 g | 0,02 g | TESTE DE MOBILIDADE em g | | | PORTARIA |
| 4000,00 g | 4000,01 g | 0,01 g | Leitura sem a sobrecarga | Sobrecarga aplicada | Leitura após sobrecarga | |
| 2500,00 g | 2500,01 g | 0,01 g | 2500,00 | 0,50 | 2500,50 | 157/22 X |
| 1500,00 g | 1500,00 g | 0,00 g | PROVA DE FIDELIDADE | | 63/44 | |
| 0,50 g | 0,50 g | 0,00 g | 1 | 2500,00 g | 2 | 2500,00 g |
| 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 3 | 2500,00 g | 4 | 2500,01 g |
| | DEPOIS | | Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão | | | |
| 0,50 g | 0,50 g | 0,00 g | Equipamento conforme: SIM | | | |
| 1500,00 g | 1500,00 g | 0,00 g | <i>Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% -</i> | | | |
| 2500,00 g | 2500,00 g | 0,00 g | <i>As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandida das balanças.</i> | | | |
| 4000,00 g | 4000,00 g | 0,00 g | Incertezas expandida das leituras: ±0,006% | | IT - 26 Rev. 02 | |
| 5200,00 g | 5200,00 g | 0,00 g | Padrões de trabalho utilizados: | | | |
| 4000,00 g | 4000,00 g | 0,00 g | jogo de peso 23 | | | |
| 2500,00 g | 2500,00 g | 0,00 g | | | | |
| 1500,00 g | 1500,00 g | 0,00 g | | | | |
| 0,50 g | 0,50 g | 0,00 g | | | | |
| 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | | | | |
| | | | Técnico: | | Reg. IPEM | |
| | | | VINICIUS GOMES | | 10002784 | |

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.