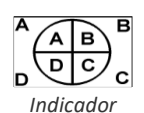


Dados Cadastrais:				O.S:021281	Data: 12/08/2024
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	008421
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	P&D / APLICAÇÃO SALGADOS
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	RADWAG	Capac. 1:	360,000 g	d1:	0,001 g
Modelo	PS-360	Capac. 2:		e1:	g
Nº Serie	13639204	Carg. Mín. :	0,020 g	d2:	0,010 g
Identific.	PD-BAS09			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	360,000 g	Classe II

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE				
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma:		100,000 g		
	ANTES		Leitura canto A	100,001 g	A B C D E F		
0,000 g	0,000 g	0,000 g	Leitura canto B	100,001 g	Indicador		
0,020 g	0,020 g	0,000 g	Leitura canto C	100,000 g	 Indicador		
50,000 g	50,000 g	0,000 g	Leitura canto D	99,999 g			
180,000 g	179,999 g	-0,001 g	Leitura canto E	N/A			
200,000 g	199,998 g	-0,002 g	Leitura canto F	N/A			
360,000 g	359,997 g	-0,003 g	TESTE DE MOBILIDADE em g				PORTARIA
200,000 g	199,980 g	-0,020 g	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada			Leitura após sobrecarga
180,000 g	179,999 g	-0,001 g	180,000	0,050	180,050	63/44	
50,000 g	50,000 g	0,000 g	PROVA DE FIDELIDADE				
0,020 g	0,020 g	0,000 g	1	180,000 g	2	180,000 g	
0,000 g	0,000 g	0,000 g	3	180,000 g	4	180,000 g	
	DEPOIS		Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão				
0,020 g	0,020 g	0,000 g	Equipamento conforme: SIM				
50,000 g	50,000 g	0,000 g	<i>Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%-</i> <i>As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas das balanças.</i>				
180,000 g	180,000 g	0,000 g	Incertezas expandida das leituras: ±0,006%		IT - 26 Rev. 02		
200,000 g	200,000 g	0,000 g	Padrões de trabalho utilizados:				
360,000 g	360,000 g	0,000 g	jogo de peso 23				
200,000 g	200,000 g	0,000 g					
180,000 g	180,000 g	0,000 g					
50,000 g	50,000 g	0,000 g					
0,020 g	0,020 g	0,000 g					
0,000 g	0,000 g	0,000 g					
			Técnico:		Reg. IPEM		
			VINICIUS GOMES		10002784		

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.