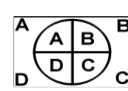


Dados Cadastrais:				O.S:01281	Data: 14/08/2024
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	005627
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	P&D / PLANTA CARNEOS
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	toledo	Capac. 1:	5,000 kg	d1:	0,001 kg
Modelo	2096-h/1	Capac. 2:		e1:	0,001 kg
Nº Serie	10000081	Carg. Mín. :	0,020 kg	d2:	
Identific.	PD-BCA07			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	4100,000 g	Classe III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE				
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 2,000 kg				
	ANTES		Leitura canto A	2,000 kg	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> A B C D E F Indicador  Indicador </div>		
0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg	Leitura canto B	2,000 kg			
0,020 kg	0,020 kg	0,000 kg	Leitura canto C	2,000 kg			
0,500 kg	0,500 kg	0,000 kg	Leitura canto D	2,000 kg			
2,000 kg	2,000 kg	0,000 kg	Leitura canto E	N/A			
2,500 kg	2,500 kg	0,000 kg	Leitura canto F	N/A			
5,000 kg	5,000 kg	0,000 kg	TESTE DE MOBILIDADE em kg			PORTARIA	
2,500 kg	2,500 kg	0,000 kg	Leitura sem a	Sobrecarga	Leitura após	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 157/22 X 63/44 </div>	
2,000 kg	2,000 kg	0,000 kg	sobrecarga	aplicada	sobrecarga		
0,500 kg	0,500 kg	0,000 kg	2,000	0,020	2,020		
0,020 kg	0,020 kg	0,000 kg	PROVA DE FIDELIDADE				
0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg	1	2,000 kg	2	2,000 kg	
---	---	---	3	2,000 kg	4	2,000 kg	
---	---	---	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão				
---	---	---	Equipamento conforme:			SIM	
---	---	---	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.				
---	---	---	Incertezas expandida das leituras:			±0,04%	IT - 26 Rev. 02
---	---	---	Padrões de trabalho utilizados:				
---	---	---	jogo de peso 23				
---	---	---	Técnico:			Reg. IPEM	
---	---	---	VINICIUS GOMES			10002784	

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.

MARTE CIENTIFICA E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA

Rua Dr Nogueira Martins, 235 - 04143-020 - Saúde - São Paulo / SP - (11) 3411-4500

CNPJ 60.431.715/0012- 83 - I.E. 147.991.635.119

www.marte.com.br