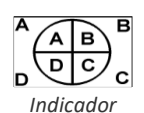


<b>Dados Cadastrais:</b>				<b>O.S:01281</b>	<b>Data: 14/08/2024</b>
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	N/C
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	P&D / AMOSTRA CARNEOS
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

**Especificações do Equipamento:**

Fabricante	OHAUS	Capac. 1:	4100,00 g	d1:	0,01 g
Modelo	ARD 110	Capac. 2:		e1:	g
Nº Serie	10170524	Carg. Mín. :	0,50 g	d2:	0,10 g
Identific.	PD-BCA08			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	4100,00 g	Classe II

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE		
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma:		1000,00 g
	<b>ANTES</b>		Leitura canto A	1000,01 g	A   B   C   D   E   F
0,00 g	0,00 g	0,00 g	Leitura canto B	1000,02 g	 <p>Indicador</p>
0,50 g	0,50 g	0,00 g	Leitura canto C	1000,01 g	
500,00 g	499,98 g	-0,02 g	Leitura canto D	999,99 g	
2000,00 g	1999,61 g	-0,39 g	Leitura canto E	N/A	
2050,00 g	2049,57 g	-0,43 g	Leitura canto F	N/A	
4100,00 g	4099,44 g	-0,56 g	<b>TESTE DE MOBILIDADE em g</b>		
2050,00 g	2049,57 g	-0,43 g	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga
2000,00 g	1999,61 g	-0,39 g	2000,00	0,50	2000,50
500,00 g	499,98 g	-0,02 g	<b>PROVA DE FIDELIDADE</b>		157/22 X
0,50 g	0,50 g	0,00 g	1	2000,00 g	2
0,00 g	0,00 g	0,00 g	3	2000,00 g	4
	<b>DEPOIS</b>		Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão		63/44
0,000 g	0,000 g	0,000 g	<b>Equipamento conforme:</b> SIM		
0,500 g	0,500 g	0,000 g	<i>Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandida das balanças.</i>		
500,000 g	500,000 g	0,000 g	Incertezas expandida das leituras: ±0,006%		IT - 26 Rev. 02
2000,000 g	2000,000 g	0,000 g	Padrões de trabalho utilizados:		
2050,000 g	2050,000 g	0,000 g	jogo de peso 23		
4100,000 g	4100,000 g	0,000 g			
2050,000 g	2050,000 g	0,000 g			
2000,000 g	2000,000 g	0,000 g			
500,000 g	500,000 g	0,000 g			
0,500 g	0,500 g	0,000 g			
0,000 g	0,000 g	0,000 g			
			<b>Técnico:</b>		<b>Reg. IPEM</b>
			VINICIUS GOMES		10002784

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.