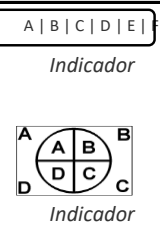


Dados Cadastrais:				O.S:01281	Data: 08/08/2024
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	000237
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	P&D / AMOSTRA AROMAS DOCE
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO	Capac. 1:	210,0000 g	d1:	0,0001 g
Modelo	AR-2140	Capac. 2:		e1:	g
Nº Serie	10257305	Carg. Mín. :	0,0100 g	d2:	0,0010 g
Identific.	PD-BCA10			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	210,0000 g	Classe I

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE			
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 100,0000 g			
	ANTES		Leitura canto A	100,0001 g		
0,0000 g	0,0000 g	0,0000 g	Leitura canto B	100,0001 g		
0,0100 g	0,0101 g	0,0001 g	Leitura canto C	100,0002 g		
50,0000 g	50,0010 g	0,0010 g	Leitura canto D	99,9999 g		
105,0000 g	105,0020 g	0,0020 g	Leitura canto E	N/A		
200,0000 g	200,0035 g	0,0035 g	Leitura canto F	N/A		
210,0000 g	210,0043 g	0,0043 g	TESTE DE MOBILIDADE em g			PORTARIA
200,0000 g	200,0001 g	0,0001 g	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	157/22 X
105,0000 g	105,0020 g	0,0020 g	105,0000	0,0100	105,0100	63/44
50,0000 g	50,0010 g	0,0010 g	PROVA DE FIDELIDADE			
0,0100 g	0,0100 g	0,0000 g	1	105,0000 g	2	105,0001 g
0,0000 g	0,0000 g	0,0000 g	3	105,0000 g	4	105,0000 g
	DEPOIS		Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão			
0,0000 g	0,0000 g	0,0000 g	Equipamento conforme: SIM			
0,0100 g	0,0100 g	0,0000 g	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.			
50,0000 g	50,0000 g	0,0000 g	Incertezas expandida das leituras: ±0,001%			IT - 26 Rev. 02
105,0000 g	105,0000 g	0,0000 g	Padrões de trabalho utilizados:			
200,0000 g	200,0000 g	0,0000 g	jogo de peso 23			
210,0000 g	210,0000 g	0,0000 g				
200,0000 g	200,0000 g	0,0000 g				
105,0000 g	105,0000 g	0,0000 g				
50,0000 g	50,0000 g	0,0000 g				
0,0100 g	0,0100 g	0,0000 g				
0,0000 g	0,0000 g	0,0000 g				
			Técnico:		Reg. IPEM	
			VINICIUS GOMES		10002784	

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.