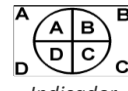


**Dados Cadastrais:**

<b>O.S:01281</b>				<b>Data: 13/08/2024</b>	
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	N/C
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	P&D / LACTEOS
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

**Especificações do Equipamento:**

Fabricante	GEHAKA	Capac. 1:	210,000 g	d1:	0,001 g
Modelo	IV 2500	Capac. 2:		e1:	g
Nº Serie	24030610001006	Carg. Mín. :	0,020 g	d2:	0,010 g
Identific.	PD-BLA05			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente <input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	<b>210,000 g</b>	Classe	II

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE			
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma:		100,000 g	
<b>ANTES</b>			Leitura canto A	100,000 g	A   B   C   D   E   F	
0,000 g	0,000 g	0,000 g	Leitura canto B	100,000 g	Indicador	
0,020 g	0,020 g	0,000 g	Leitura canto C	100,000 g		
50,000 g	50,000 g	0,000 g	Leitura canto D	100,000 g		
105,000 g	105,000 g	0,000 g	Leitura canto E	N/A		
200,000 g	200,002 g	0,002 g	Leitura canto F	N/A	Indicador	
210,000 g	210,004 g	0,004 g	<b>TESTE DE MOBILIDADE em g</b>			
200,000 g	200,003 g	0,003 g	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	<b>PORTARIA</b>
105,000 g	105,000 g	0,000 g	105,0000	0,0100	105,0100	157/22 X
50,000 g	50,000 g	0,000 g	<b>PROVA DE FIDELIDADE</b>			63/44
0,020 g	0,020 g	0,000 g	1 105,0000 g		2 105,0001 g	
0,000 g	0,000 g	0,000 g	3 105,0000 g		4 105,0000 g	
<b>DEPOIS</b>			Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão			
0,020 g	0,020 g	0,000 g	<b>Equipamento conforme:</b> SIM			
50,000 g	50,000 g	0,000 g	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%-			
105,000 g	105,000 g	0,000 g	As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandida das balanças.			
200,000 g	200,000 g	0,000 g	Incertezas expandida das leituras: ±0,006%			IT - 26 Rev. 02
210,000 g	210,000 g	0,000 g	Padrões de trabalho utilizados:			
200,000 g	200,000 g	0,000 g	jogo de peso 23			
105,000 g	105,000 g	0,000 g				
50,000 g	50,000 g	0,000 g				
0,020 g	0,020 g	0,000 g				
0,000 g	0,000 g	0,000 g				
			<b>Técnico:</b>		<b>Reg. IPEM</b>	
			VINICIUS GOMES		10002784	

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.