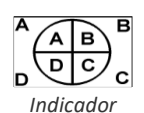


Dados Cadastrais:				O.S:021281	Data: 14/08/2024
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	004247
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	P&D / PANIFICAÇÃO
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	RADWAG	Capac. 1:	4500,00 g	d1:	0,01 g
Modelo	PS-4500	Capac. 2:		e1:	0,10 g
Nº Serie	12862862	Carg. Mín. :	0,50 g	d2:	g
Identific.	PD-BPA03			e2:	--
Local de calibração:		<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	4500,00 g
				Classe	II

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE		
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 1000,00 g		
ANTES			Leitura canto A	999,97 g	A B C D E F
0,00 g	0,00 g	0,00 g	Leitura canto B	999,99 g	<div style="text-align: center;">  <p>Indicador</p> </div>
0,50 g	0,50 g	0,00 g	Leitura canto C	1000,01 g	
500,00 g	500,00 g	0,00 g	Leitura canto D	1000,03 g	
2000,00 g	1999,97 g	-0,03 g	Leitura canto E	N/A	
2250,00 g	2249,94 g	-0,06 g	Leitura canto F	N/A	
4500,00 g	4499,81 g	-0,19 g	TESTE DE MOBILIDADE em g		
2250,00 g	2249,94 g	-0,06 g	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga
2000,00 g	1999,97 g	-0,03 g	2000,00	0,50	2000,50
500,00 g	500,00 g	0,00 g	PROVA DE FIDELIDADE		
0,50 g	0,50 g	0,00 g	1 2000,00 g	2 2000,00 g	
0,00 g	0,00 g	0,00 g	3 2000,00 g	4 2000,00 g	
0,00 g	0,00 g	0,00 g	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão		
0,50 g	0,50 g	0,00 g	Equipamento conforme: SIM		
500,00 g	500,00 g	0,00 g	<small>Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas das balanças.</small>		
2000,00 g	2000,00 g	0,00 g	Incertezas expandida das leituras: ±0,006%		
2250,00 g	2250,00 g	0,00 g	IT - 26 Rev. 02		
4500,00 g	4500,00 g	0,00 g	Padrões de trabalho utilizados:		
2250,00 g	2250,00 g	0,00 g	jogo de peso 23		
2000,00 g	2000,00 g	0,00 g			
500,00 g	500,00 g	0,00 g			
0,50 g	0,50 g	0,00 g			
0,00 g	0,00 g	0,00 g			
			Técnico:		Reg. IPEM
			VINICIUS GOMES		10002784

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.