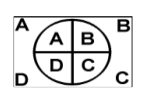


Dados Cadastrais:				O.S:01281	Data: 14/08/2024
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	004248
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	P&D / PANIFICAÇÃO
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	RADWAG	Capac. 1:	220,0000 g	d1:	0,0001 g
Modelo	AS220R2P	Capac. 2:		e1:	g
Nº Serie	12872076	Carg. Mín. :	0,0100 g	d2:	0,0010 g
Identific.	PD-BPA04			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	220,0000 g	Classe I

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE		
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma:		100,0000 g
	ANTES		Leitura canto A	100,0001 g	 Indicador
0,0000 g	0,0000 g	0,0000 g	Leitura canto B	100,0000 g	
0,0100 g	0,0100 g	0,0000 g	Leitura canto C	99,9998 g	
50,0000 g	50,0000 g	0,0000 g	Leitura canto D	99,9999 g	
110,0000 g	110,0003 g	0,0003 g	Leitura canto E	N/A	
200,0000 g	200,0008 g	0,0008 g	Leitura canto F	N/A	
220,0000 g	220,0000 g	0,0000 g	TESTE DE MOBILIDADE em g		
200,0000 g	200,0008 g	0,0008 g	Leitura sem a	Sobrecarga	Leitura após
110,0000 g	110,0003 g	0,0003 g	sobrecarga	aplicada	sobrecarga
50,0000 g	50,0000 g	0,0000 g	110,0000	0,0100	110,0100
0,0100 g	0,0100 g	0,0000 g	PROVA DE FIDELIDADE		
0,0000 g	0,0000 g	0,0000 g	1	110,0000 g	2
	DEPOIS		3	110,0000 g	4
0,0000 g	0,0000 g	0,0000 g	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão		
0,0100 g	0,0100 g	0,0000 g	Equipamento conforme: SIM		
50,0000 g	50,0000 g	0,0000 g	<i>Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator de abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% -</i>		
110,0000 g	110,0000 g	0,0000 g	<i>As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas das balanças.</i>		
200,0000 g	200,0000 g	0,0000 g	Incertezas expandida das leituras: ±0,001%		IT - 26 Rev. 02
220,0000 g	200,0000 g	0,0000 g	Padrões de trabalho utilizados:		
200,0000 g	200,0000 g	0,0000 g	jogo de peso 23		
110,0000 g	110,0000 g	0,0000 g			
50,0000 g	50,0000 g	0,0000 g			
0,0100 g	0,0100 g	0,0000 g			
0,0000 g	0,0000 g	0,0000 g			
			Técnico:		Reg. IPEM
			VINICIUS GOMES		10002784

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.