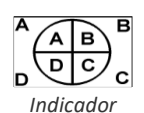


Dados Cadastrais:				O.S:01281	Data: 14/08/2024
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	N/C
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	P&D / AMOSTRA CARNEOS
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	toledo	Capac. 1:	5,000 kg	d1:	0,001 kg
Modelo	2096-h/1	Capac. 2:		e1:	0,001 kg
Nº Serie	10751902	Carg. Mín. :	0,020 kg	d2:	
Identific.	PD-BS003			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	5,000 g	Classe III

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE				
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma:		2,000 kg		
ANTES			Leitura canto A	2,000 kg	A B C D E F		
0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg	Leitura canto B	2,000 kg			
0,020 kg	0,020 kg	0,000 kg	Leitura canto C	2,000 kg			
0,500 kg	0,500 kg	0,000 kg	Leitura canto D	2,000 kg			
2,000 kg	2,000 kg	0,000 kg	Leitura canto E	N/A			
2,500 kg	2,499 kg	-0,001 kg	Leitura canto F	N/A			
5,000 kg	4,997 kg	-0,003 kg	TESTE DE MOBILIDADE em kg			PORTARIA	
2,500 kg	2,499 kg	-0,001 kg	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	157/22	X
2,000 kg	2,000 kg	0,000 kg	2,000	0,020	2,020	63/44	
0,500 kg	0,500 kg	0,000 kg	PROVA DE FIDELIDADE				
0,020 kg	0,020 kg	0,000 kg	1	2,000 kg	2	2,000 kg	
0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg	3	2,000 kg	4	2,000 kg	
DEPOIS			Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão				
0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg	Equipamento conforme: SIM				
0,020 kg	0,020 kg	0,000 kg	<i>Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas das balanças.</i>				
0,500 kg	0,500 kg	0,000 kg	Incertezas expandida das leituras: ±0,04%			IT - 26 Rev. 02	
2,000 kg	2,000 kg	0,000 kg	Padrões de trabalho utilizados:				
2,500 kg	2,500 kg	0,000 kg	jogo de peso 23				
0,500 kg	0,500 kg	0,000 kg					
0,020 kg	0,020 kg	0,000 kg					
0,000 kg	0,000 kg	0,000 kg					
			Técnico:		Reg. IPEM		
			VINICIUS GOMES		10002784		

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.