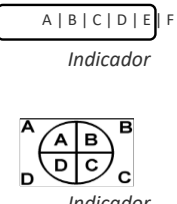


Dados Cadastrais:				O.S:021281	Data: 21/08/2024
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	8378
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	SALA DE PESAGEM OLEOS AROMAS
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	RADWAG	Capac. 1:	600,000 g	d1:	0,001 g
Modelo	PS600	Capac. 2:		e1:	g
Nº Serie	13534603	Carg. Mín. :	0,020 g	d2:	0,010 g
Identific.	PO-03			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	600,000 g	Classe II

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE			
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 2000,000 g			
	ANTES		Leitura canto A	200,000 g		
0,000 g	0,000 g	0,000 g	Leitura canto B	200,000 g		
0,020 g	0,020 g	0,000 g	Leitura canto C	200,000 g		
50,000 g	50,000 g	0,000 g	Leitura canto D	200,000 g		
200,000 g	200,001 g	0,001 g	Leitura canto E	N/A		
300,000 g	300,003 g	0,003 g	Leitura canto F	N/A		
			TESTE DE MOBILIDADE em g			PORTARIA
			Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	157/22 X
50,000 g	50,000 g	0,000 g	180,000	0,050	180,050	63/44
0,020 g	0,020 g	0,000 g	PROVA DE FIDELIDADE			
0,000 g	0,000 g	0,000 g	1 180,000 g	2 180,000 g		
	DEPOIS		3 180,000 g	4 180,000 g		
0,000 g	0,000 g	0,000 g	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão			
0,020 g	0,020 g	0,000 g	Equipamento conforme: SIM			
50,000 g	50,000 g	0,000 g	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidadas balanças.			
200,000 g	200,000 g	0,000 g	Incertezas expandida das leituras: ±0,006%		IT - 26 Rev. 02	
300,000 g	300,000 g	0,000 g	Padrões de trabalho utilizados:			
200,000 g	200,000 g	0,000 g	jogo de peso 23			
50,000 g	50,000 g	0,000 g				
0,020 g	0,020 g	0,000 g				
0,000 g	0,000 g	0,000 g				
			Técnico:		Reg. IPEM	
			VINICIUS GOMES		10002784	

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.